


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

BUDESIN U 7,5%

Δοκιμασμένο VAH (DGHM)

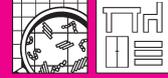

Αρ. 142.542 Δοχείο 10 λίτρων **Αρ. 142.543** Μπουκάλι 6 x 1L

- έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό επιφανειών
- ελεγμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του VAH (DGHM)
- Χρήση σε νοσοκομεία, γενικά ιατρεία - ειδικά για ακρυλικό γυαλί ή παρόμοιες επιφάνειες
- ιδιαίτερα οικονομικό
- έχει ευρύ μικροβιοκτόνο φάσμα δράσης
- πολύ αποτελεσματικό ενάντια στα gram-αρνητικά και θετικά κατά Gram βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και ιούς

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν προορίζεται για την απολύμανση σκληρών επιφανειών σε νοσοκομεία και γενικά ιατρεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακατέργαστο ξύλο, ακρυλικό γυαλί και παρόμοιες επιφάνειες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΦΗΣ:

βακτηριοκτόνος/λευριοκτόνος	οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
VAH	μικρή ποσότητα	5

ιούς (Οδηγίες RKI/DVV)	οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Ιός ηπατίτιδας Β	υψηλός	1
ιός rota	μικρή ποσότητα	1
ιός δαμαλίτιδας	υψηλός	1
BVDV	υψηλός	1

ιούς (EN14476)	οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Norovirus EN 14476	μικρή ποσότητα	30
Γρίπη Α (H1N1) Ιός EN 14476	υψηλός	15

Διεύθυνση :
1ο Χιλ. Χερσονήσου –
Καστελίου
Τηλ :
+30 28970 22974
+30 6944 519955

Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων :
Κληρονόμου Εύα

	οργανικό φορτίο	χρόνος έκθεσης [min]
Ακατέργαστο ξύλο μολυσμένο με μύκητες		60
ακρυλικό γυαλί κλπ. επιφάνειες		1
Βακτηριοκτόνο EN 1040 P.aeruginosa, S.aureus		5
Βακτηριοκτόνο EN 1276 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae	μικρή ποσότητα	5
Βακτηριοκτόνο EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	υψηλός	5
Μυκητοκτόνο EN 1650 C. albicans	μικρή ποσότητα	5
Μυκητοκτόνο 13624 C. albicans	μικρή ποσότητα	5
Βακτηριοκτόνο EN 13727 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μικρή ποσότητα	5
Βακτηριοκτόνο EN 14561 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μικρή ποσότητα	15
Μυκητοκτόνο EN 14562 C. albicans	μικρή ποσότητα	15
Βακτηριοκτόνο EN 13697 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae		5
Levurocidal EN 13697 C. albicans		15

Χρησιμοποιήστε μόνο στις προδιαγεγραμμένες συγκεντρώσεις και χρόνους. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τα τρόφιμα με νερό. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε το Budesin U 7,5% με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση, τηρείτε πάντα τις πληροφορίες της ετικέτας και του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ακατάλληλη χρήση και την προκύπτουσα ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εμφάνιση: άχρωμο υγρό
 Οσμή: σαπουνάδα
 Ιξώδες: λεπτό
 Πυκνότητα: 1000 g/l
 τιμή pH στο συμπύκνωμα: 7

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Λιγότερο από 5%: κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

Περαιτέρω πληροφορίες: 100 g Budesin U 7,5% περιέχει 0,25 g διδεκυλαμμώνιο χλωριούχο, 0,25 g χλωριούχου αλκυλοδιμεθυλαμμωνίου και 0,25 g χλωριούχου αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου ως απολυμαντικά δραστικά συστατικά

Giscode: ΓΔ 0

Αριθμός έγκρισης:..... N-11981 •Εγκρίθηκε για απολύμανση στην περιοχή του δημόσια υγεία.

Διάρκεια ζωής: στο πρωτότυπο δοχείο τουλάχιστον 3 ετών, προστατεύστε από τον παγετό και τη ζέστη

ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ:.....παραλείπεται

Σύμφωνα με τις οδηγίες της EK/GefahrstoffV, το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο παρασκεύασμα.

Διεύθυνση :

1ο Χιλ. Χερσονήσου –

Καστελίου

Τηλ :

+30 28970 22974

+30 6944 519955

Email :

info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων :

Κληρονόμου Εύα